




Smartline Hybrid

Smartline Hybrid ist ein dynamisches Matratzensersatzsystem kombiniert mit den Vorteilen moderner Schaumtechnologie. Das System wurde speziell für Patienten entwickelt, bei denen davon auszugehen ist, dass ein sehr hohes Dekubitus Risiko besteht. Zusätzlich ist es im dynamischen Modus zur Therapie-Unterstützung hervorragend geeignet. Dieses einzigartige System bietet ein hohes Maß an Patientenkomfort und kann, wenn klinisch erforderlich, in ein dynamisches Matratzensystem umgewandelt werden. Dafür wird die Sensor gesteuerte digitale Pumpe angeschlossen.

In den „U“-förmigen Schaumstoff-Rahmen sind 14 mit Polyurethan gefüllte Luftzellen eingebettet. Der Bezug ist mit Evakuationschläufen versehen. Die Oberseite des Bezuges besteht aus einem elastischen PU, welcher mit Hohlfasern abgesteppt ist. Kopf- und Fußteil bestehen aus einem hochwertigem RG70 Kaltschaum um Druckstellen optimal zu verteilen und vorzubeugen.

Eine maximale Gewichtskapazität von bis zu 200 kg ermöglicht es dem Produkt, die Anforderungen schwererer Patienten zu erfüllen.

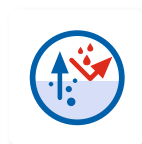

Technische Daten

Steuergerät:

Maße: ca. 28 x 16 x 10 cm
Gewicht: 1,7 kg
Luftleistung: 8,5 – 9 Liter / min,
LED-Gewichtseinstellung
Spannungswerte: 230V / 50Hz
Druckbereich: 20 – 55mmHg,
Drucksensor innen
Zykluszeit: 10 min

Unterdruckalarm (mit Stummschaltung),
Netzausfallalarm, Wechseldruck/statik-
betrieb, abnehmbares Netzkabel

Matratze:

Maße: 200 x 90 x 18 cm
Gewicht: 18 kg

Transportfunktion mit Schnellkupplung

Material:

Luft Zellen: 14 PU Zellen
Kopf- und Fußteil: Kaltschaum RG 70

Bezug: bi-elastisch PU--beschichtet
und wattiert, atmungsaktiv,
rutschhemmend
& wasserabweisend

Basis: Nylon / PVC mit 4 Fixiergurten

Dekubitusgrad

● I ● II ● III ● IV

Max. Patientengewicht: 200 kg